


Guía rápida para el NasoNeb® Nasal Nebulizer



El objetivo de esta guía rápida no es reemplazar el manual de instrucciones que acompaña a su NasoNeb® Nasal Nebulizer.

Cómo acostumbrarse al NasoNeb Nasal Nebulizer. Recomendamos que haga las cosas paso a paso al empezar a usar el NasoNeb Nasal Nebulizer. Antes de usar el NasoNeb Nasal Nebulizer con líquido, ensamble y opere el sistema como se indica a continuación *sin líquido* para familiarizarse con la operación del sistema.

Pruebe con una sesión *solamente con solución salina* para encontrar su posición adecuada. Las cavidades nasales y de los senos paranasales de cada persona son algo diferentes y usar la solución salina le dará una idea de la mejor posición y ángulo para que usted sostenga el vaso para el medicamento NasoNeb. El vaso para el medicamento deberá sostenerse en forma casi vertical, con la cabeza inclinada aproximadamente 30 grados hacia adelante. Las puntas del accesorio insertable no deberán entrar en la nariz. Necesita experimentar para obtener *su* ángulo y posición apropiados.

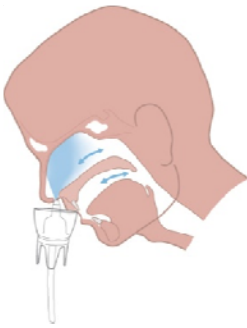


Consejos adicionales

- **Mantenga la boca abierta al usar el NasoNeb.** La intención es que el aire que le entra por la nariz le salga por la boca. Colocar la punta de su lengua en el paladar le ayudará a inhalar la niebla hacia la cavidad nasal.
- **Las puntas del accesorio insertable casi no deberán penetrar en las fosas nasales.** Sentirá que la niebla penetra por la parte trasera de la cavidad nasal cuando el vaso para el medicamento está en la posición adecuada. Algunos pacientes han reportado beneficios al usar cintas Breathe- Right® para despejar mejor la nariz durante el tratamiento.
- **Apague el compresor** antes de alejar el vaso para el medicamento de sus fosas nasales.
- **Si el accesorio insertable no se asienta bien, burbujea o salta,** una o ambas boquillas podrían estar bloqueadas. Puede colocar el extremo del tubo ya sea sobre las boquillas del accesorio insertable o las boquillas del recipiente para limpiar una partícula que esté causando una obstrucción. La solución salina puede cristalizar en el accesorio insertable o el recipiente principal si no está completamente limpio. Limpie el ensamblaje manual después de cada sesión de tratamiento.
- **Algunos medicamentos pueden dejar espuma en el vaso para el medicamento,** lo cual es normal. Simplemente pare el tratamiento cuando solo quede solamente espuma en el vaso.

Cómo usar el NasoNeb Nasal Nebulizer

1. Lávese las manos con agua tibia jabonosa y enjuágueselas bien antes de comenzar este procedimiento
2. Encuentre una superficie plana y limpia con corriente eléctrica, cercana a un lavabo, para instalar el NasoNeb y conectar el cable de la corriente
3. Coloque el accesorio insertable en el vaso para el medicamento usando las pestañas de alineación para asegurarse de que está colocado correctamente
 - a. El accesorio insertable deberá asentarse en el fondo del recipiente principal y las boquillas deberán salir aproximadamente ½ pulgada sobre el borde del recipiente principal. Si las boquillas salen más de 1 pulgada sobre el recipiente principal, dé vuelta al accesorio insertable.
4. Coloque la tapa sobre el accesorio insertable
5. Ajuste el tubo al compresor y a la base del recipiente principal
6. Coloque el ensamblaje en el puerto de acoplamiento del compresor
7. Añada la solución salina y los viales con el medicamento siguiendo las instrucciones
8. Sostenga cómodamente en su mano el ensamblaje del vaso para el medicamento con la porción abierta de la tapa alejada de usted
9. Coloque el ensamblaje del vaso para el medicamento por debajo de su nariz
10. Con las boquillas del accesorio insertable en la posición adecuada, encienda el compresor
11. Puede encontrar que parar para sonarse la nariz después de 20 a 30 segundos le ayudará a desbloquear la nariz y permitir que el medicamento penetre a su cavidad nasal.
12. Deje que el medicamento escurra del vaso
 - a. El tratamiento deberá durar entre 1 y 5 minutos

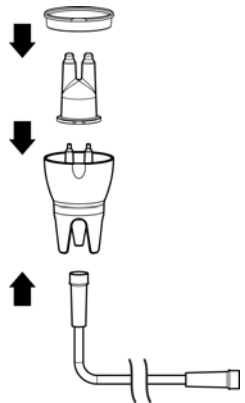

Después del tratamiento

1. Desconecte el tubo del vaso para el medicamento y limpie todas las partes del ensamblaje del vaso para el medicamentos como se indica en el manual
2. Si el tubo está mojado, limpie la parte exterior del tubo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco
 - a. No lave el interior del tubo ni lo sumerja en agua, mantenga el interior del tubo seco
3. Limpie el exterior del compresor con un paño húmedo si está mojado y luego séquelo
4. Deje que el ensamblaje se seque en el aire completamente antes del próximo tratamiento